




Sidst revideret Maj 2024

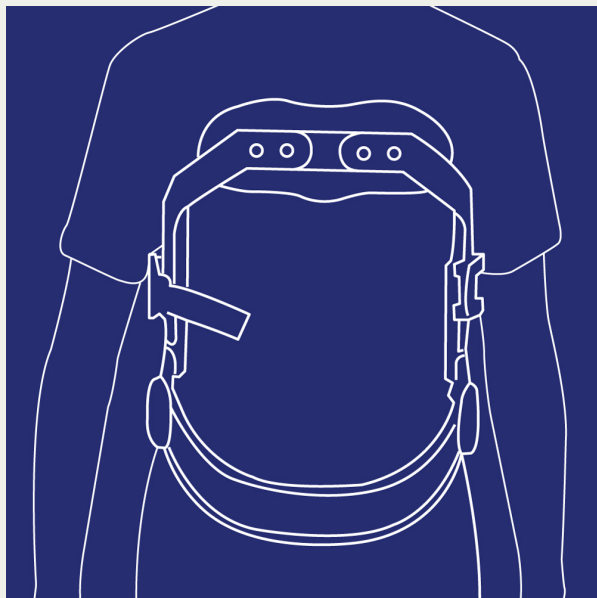

Brugervejledning

Trepunktskorset

SN


REF



Sahva A/S – Nykær 68, 2605 Brøndby



sahva
ottobock.care

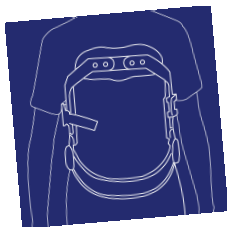

Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om dit nye trepunktskorset, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af korsettet.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Korsettet skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

Funktion

Trepunktskorsettet har til formål at begrænse bevægelser i ryggen ved at holde ryggen strakt og immobil. Korsettet er justerbart i højde og brystbredde. Den har en brystplade, der gør det enkelt at indstille vinklen.

Indikation

Trepunktskorsettet ordineres af speciallægen til behandling af ryglidelser som for eksempel frakturer, luksationer, osteoporose, arthroses i lændedelen osv.

Materialer

Korsettet er fremstillet i letvægts aluminiumslegering med sikkerhedsspænder i komposit materiale og polstring i vandafvisende vinyl-læder.

Behandlingstid for midlertidige produkter

Når trepunktskorsettet er ordineret til midlertidig brug, er det lægen, der afgør, hvornår behandlingen er færdig.

Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

Brug af produktet

Påtagning

Åben spændet på venstre side og tag bæltet af knappen på højre side. Korsettet tages nu på ved at ligge fladt på ryggen og placere rammen foran på kroppen, så bækkenbøjlen sidder helt ned til lysken. Hvis man bøjer det ene ben i hoften til 90 grader, skal bækkenbøjlen støde på låret. Herefter skubbes rygpladen ind under ryggen; gjorden trækkes ud på den anden side og trykkes ned over knappen på højre side. Nu lukkes spændet på venstre side ved at vippe bøjlen frem, indtil det låser med et lille klik. Nu sidder korsettet fast, og man kan rejse sig fra sengen.


Aftagning

Korsettet tages af liggende ved at udføre ovennævnte procedure i modsat rækkefølge.

OBS: Korsettet skal altid tages på og af i liggende stilling, med mindre lægen har sagt noget andet.

Pleje af huden

Det er en fordel, at benytte en undertrøje under trepunktskorsettet således, at man undgår direkte kontakt med huden. Undertrøjen skiftes hyppigt, og huden vaskes dagligt, da du sveder mere med korset end uden.

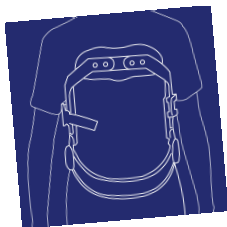

Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre korsettets pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at pasformen er forringet.

Særlige risici

Der kan opstå trykmærker fra korsettet. Disse forsvinder som regel cirka tyve minutter efter, korsettet er taget af. Ved vedvarende trykgener skal du kontakte din bandagist.

Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

Rengøring

Vask korsettet med en svamp med varmt vand og neutral sæbe. Skyl grundigt efter med rent vand. Tør af med et håndklæde.

Bortskaffelse/returnering

For midlertidige korsetter der er udleveret i forbindelse med en behandling på hospitalet, skal du forhøre dig på hospitalet, om du skal returnere korsettet til dem.

Reparation/Fornyelse af produkt

Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje.

Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klasse I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning.

Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.

Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.

